

Configuratie Scipio

Instellen OmniHis Scipio versie 2.409 en hoger.

Middels onderstaande instellingen kan PADSY gestart worden vanuit OmniHis Scipio. PADSY maakt gebruik van de patiëntgegevens die vanuit Scipio doorgegeven worden en importeert deze in de eigen database.


Open Scipio en ga naar het menu Archief => Werkplek instellingen.



Selecteer het tabblad Diversen en druk op wijzig.



Blader middels de link “Map naar Padsybridge” naar de GDT map van PADSY. Bij een standaard installatie bevindt deze zich in de PADSY folder in de Programma map.

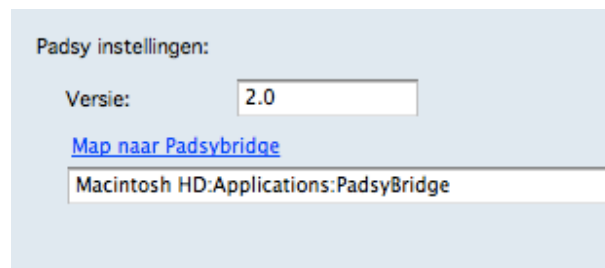


Druk op bewaren om de instellingen op te slaan.


Herhaal bovenstaande instellingen op iedere werkplek waar gebruik van de koppeling gewenst is.

Gebruik maken van de koppeling


Selecteer een patiënt in Scipio en ga naar het tabblad voor laboratorium uitslagen.

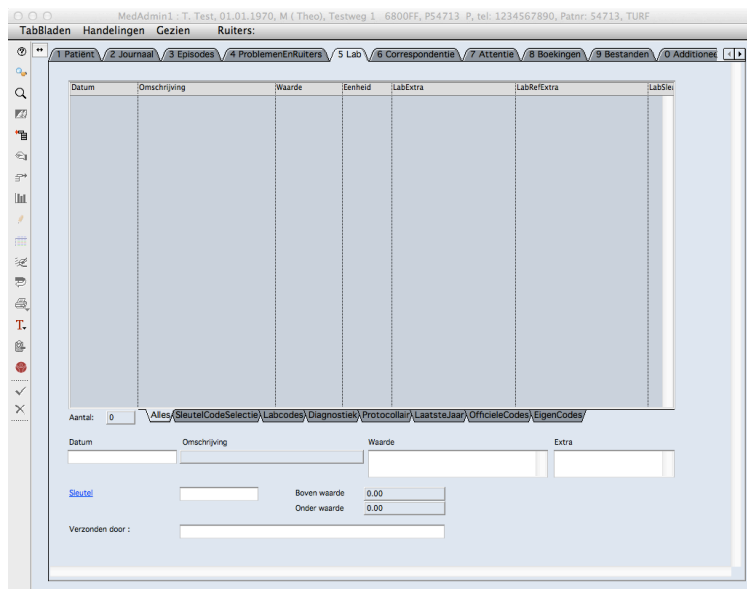

<= Druk op de PADSY knop in de linker menubalk om de koppeling te starten.

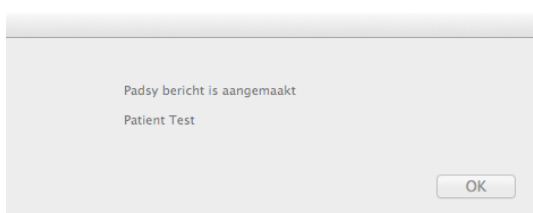

Scipio geeft een melding dat de koppeling gestart wordt en na 1 -2 seconden wordt het keuzescherf van PADSY weergegeven.

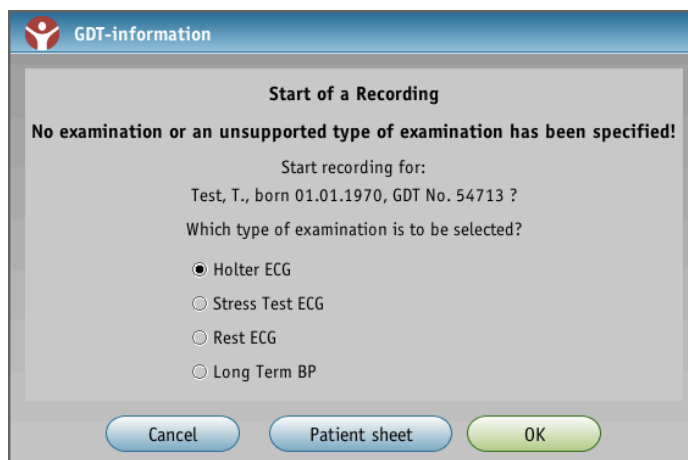

Selecteer de gewenste optie om door te gaan naar PADSY.